

VERMEIREN

Iris

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE



EN

Instructions for specialist dealer

This instruction manual is part and parcel of the product and must accompany every product sold.

Version: C, 2020-06

FR

Instructions pour les distributeurs

Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque produit vendu.

Version : C, 2020-06

NL

Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: C, 2020-06

DE

Hinweise für den Fachhändler

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestand-teil des Produkts und ist bei jeder Produkts auszuhändigen.

Version: C, 2020-06

IT

Istruzioni per il rivenditore

Il presente Manuale di istruzioni è parte integrante del prodotto e deve essere fornito assieme alla prodotto.

Versione: C, 2020-06

ES

Instrucciones destinadas a los distribuidores especializados

El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto y se debe adjuntar a todas las producto que se vendan.

Versión: C, 2020-06

PL

Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego produktu.

Wersja: C, 2020-06

CS

Pokyny pro specializovaného prodejce

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu.

Verze: A, 2020-06

All rights reserved, including translation.

No part of this manual may be reproduced in any form what so ever (print, photocopy, microfilm or any other process) without written permission of the publisher, or processed, duplicated or distributed by using electronic systems.

Tous droits réservés, y compris la traduction.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.

Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procédé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.

Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil der Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Tutti i diritti riservati (anche sulla traduzione).

Il presente manuale non può essere riprodotto, neppure parzialmente, con alcun mezzo (stampa, fotocopia, microfilm o altro procedimento) senza l'autorizzazione scritta della casa produttrice, né elaborato, duplicato o distribuito con l'ausilio di sistemi elettronici.

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento), así como la edición, copia o distribución empleando sistemas electrónicos, sin el permiso escrito del editor.


Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie może być również przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocą systemów elektronicznych.

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

Šíření jakékoli části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.

Foldable bar Iris

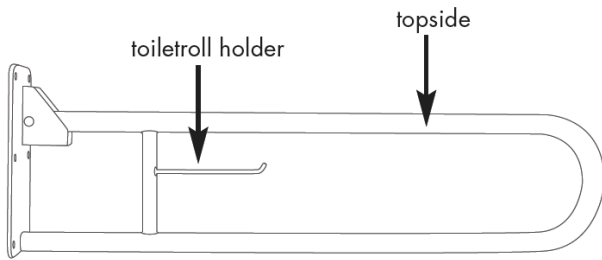

1 Upon delivery

Unpack your product and verify if the delivery is complete. Following items should be included:

- 1 foldable bar
- 6 screws
- 6 wall plugs
- Manual

Verify your product for transport damage. If you find any damages after delivery, contact the transporter.

2 Mounting the bathroom bar


CAUTION


Risk of injuries

- Make sure that the bathroom bar is mounted securely to the wall. Check the fixation on a regular basis.
- Be sure that there are no electrical cables or other tubes in the mounting area of the bathroom bar.
- The plugs delivered with the product are suitable for concrete walls or full brick walls. For other types of walls, please inquire about the correct type of mounting equipment.

The foldable bar Iris is designed as a general support element. Additionally, a toilet roll holder is provided. They are useable everywhere, including humid environments. Use the installation materials which are delivered with Iris.

To install Iris:

1. Put the bathroom bar in the desired position.
2. Mark the fixation holes on the wall.
3. Drill holes in the wall.
4. Mount the plugs.
5. Place the bathroom bar against the wall.
6. Place the screws and fasten firmly.

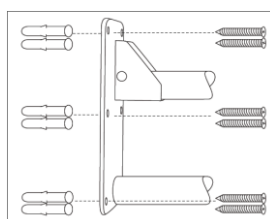

If you have any doubts, do not hesitate to contact a professional to install Iris for you.

3 Using the bathroom bar


CAUTION

Risk of burns

- Be careful when using in extreme hot or cold environments (sunshine, extreme cold, saunas, etc.).
- If you notice any defects, refrain from using Iris.
- Avoid hanging heavy objects on the bar as it might cause damage.

The maximum pulling weight for the bathroom bar is 130 kg.

4 Maintenance

Iris can be cleaned and disinfected with normal household products. Avoid using abrasive cleaning products that can cause discoloration.

The high quality of the surface layer guarantees optimal protection against corrosion. If the outer coat is damaged by scratching or in some other way, get your specialist dealer to repair the affected surface.

4.1 Expected lifespan

The bathroom bar is designed to have an average lifespan of 5 years.


5 Technical specifications

Brand	Vermeiren
Type	Bathroom bar
Model	Iris

Description	Dimensions
Maximum load	130 kg
Length	740 mm
Height	175 mm
Minimum mounting area (mounting plate)	230 x 100 mm
Storage temperature	+5°C - +41°C

We reserve the right to introduce technical changes.
 Measurement tolerance +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.

Barre d'appui rabattable Iris

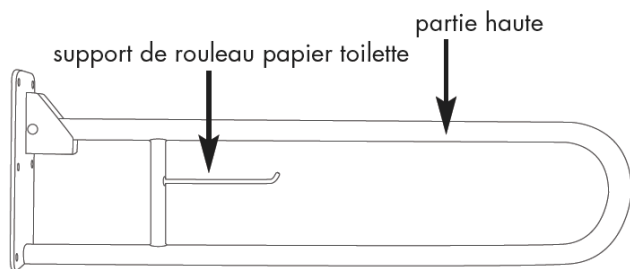

1 Lors de la livraison

Déballez le produit et contrôlez si la livraison est complète. Se trouvent dans le paquet:

- 1 barre d'appui
- 6 vis
- 6 chevilles
- Manuel d'instructions

Inspectez soigneusement l'expédition afin de vous assurer que le transport n'ait occasionné aucun dommage. S'il s'avère que votre produit présente un défaut, prenez contact avec le transporteur.

2 Montage de la barre d'appui


 **ATTENTION** Risque de blessures

- Vérifiez que la barre est correctement fixée sur le mur. Vérifiez régulièrement la fixation.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câble électrique ou d'autres tubes à l'endroit où vous allez installer votre barre d'appui.
- Les chevilles livrées avec le produit conviennent pour les murs en béton ou les murs en briques pleines. Pour d'autres types de murs, veuillez-vous renseigner sur le type de matériel de montage approprié.

La barre d'appui rabattable Iris est conçue comme support général, et peut être installée n'importe où, y comprise dans des endroits humides. Un emplacement pour un rouleau de papier est prévu. Utilisez le matériel qui est fourni pour l'installation.

Pour installer Iris:

1. Placez la barre dans la position souhaitée.
2. Marquez l'emplacement correct de la visserie sur le mur.
3. Percez les trous nécessaires.
4. Montez les chevilles.
5. Placez la barre d'appui au mur.

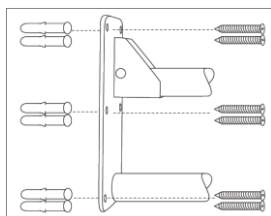

6. Placez les vis et fixez-les fermement.

Si vous avez le moindre doute, contactez un professionnel pour l'installation de votre barre d'appui.

3 Utiliser la barre d'appui

 **ATTENTION** Risque de blessures, brûlures

- Soyez prudents lorsque vous utilisez ce produit dans des environnements chauds ou froids (soleil, froid extrême, saunas, etc.).
- Si vous notez n'importe quel défaut, abstenez-vous d'utiliser la barre lizzie.
- Evitez de pendre des objets trop lourds sur la barre d'appui.

Le poids de traction maximum pour la barre est de 130 Kg.

4 Entretien

La barre d'appui peut être nettoyée et désinfectée avec des produits ménagers d'entretien. Evitez l'utilisation de produits agressifs ou abrasifs qui pourraient causer une décoloration du produit.

La grande qualité de la couche de surface garantit une protection optimale contre la corrosion. Si la couche externe est endommagée par une rayure ou autre, faites réparer la surface concernée par votre distributeur.

4.1 Durée de vie attendue

La barre d'appui est conçue pour avoir une durée de vie moyenne de 5 ans.


5 Détails techniques

Marque	Vermeiren
Type	Barre d'appui
Modèle	Iris

Description	Dimensions
Charge Maximum	130 kg
Longueur	740 mm
Hauteur	175 mm
Zone de montage minimale (Plaque de fixation)	230 x 100 mm
Temperature de stockage	+5°C - +41°C

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesure ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°

Opklapbare steun Iris

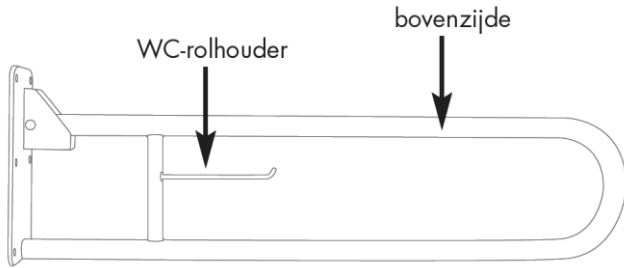

1 Bij levering

Pak het product uit en controleer of de levering volledig is. In het pakket zitten:

- 1 opklapbare steun
- 6 schroeven
- 6 muurpluggen
- Handleiding

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

2 De badkamergreep installeren



VOORZICHTIG


Gevaar voor letsel

- Zorg ervoor dat de badkamergreep goed bevestigd is aan de muur. Controleer regelmatig de bevestiging.
- Zorg ervoor dat zich geen elektrische kabels of andere buizen in de montageruimte van de badkamergreep bevinden.
- De pluggen die met het product geleverd worden, zijn geschikt voor betonnen of volle stenen muren. Laat u voor andere soorten muren informeren over het correcte bevestigingsmateriaal.

De opklapbare steun Iris is ontworpen om u te helpen bij het opstaan. Een toiletrolhouder is tevens voorzien. De handgreep is overal te gebruiken, inclusief vochtige ruimtes. Gebruik het montagemateriaal dat bij Iris geleverd werd.

Om Iris te installeren:

1. Plaats de badkamergreep in de gewenste positie.
2. Duid de montagegaten aan op de muur.
3. Boor gaten in de muur.
4. Plaats de pluggen.
5. Plaats de badkamergreep tegen de muur.
6. Plaats de schroeven en draai stevig aan.

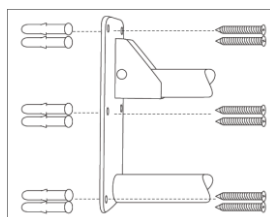

Indien u ergens over twijfelt, aarzel dan niet om een professioneel persoon te contacteren om Iris voor u te installeren.

3 De badkamergreep gebruiken



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel, brandwonden

- Wees voorzichtig bij het gebruik in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme kou, sauna's, enz.).
- Gebruik Iris niet indien u enig defect opmerkt.
- Hang geen zware voorwerpen aan de steun, dit kan schade veroorzaken.

Het maximale trekgewicht voor de badkamergreep is 130 kg.

4 Onderhoud

Iris kan gereinigd en gedesinfecteerd worden met normale huishoudelijke producten. Gebruik geen agressieve producten die beschadigen kunnen veroorzaken.

Door de hoogwaardige oppervlaktebehandeling is een optimale corrosiebescherming gegarandeerd. Wanneer de buitenste coating door krassen e.d. is beschadigd, laat deze dan door uw vakhandelaar repareren.

4.1 Verwachte levensduur

De badkamergreep is ontwikkeld voor een gemiddelde levensduur van 5 jaar.


5 Technische specificaties

Merk	Vermeiren
Type	Badkamergreep
Model	Iris

Omschrijving	Afmetingen
Max. belading	130 kg
Lengte	740 mm
Hoogte	175 mm
Minimale oppervlakte voor montage (montageplaat)	230 x 100 mm
Opslagtemperatuur	+5°C - +41°C

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.
Meettolerantie, +/- 15 mm / 1,5kg / 1,5°.

Stützklappgriff Iris

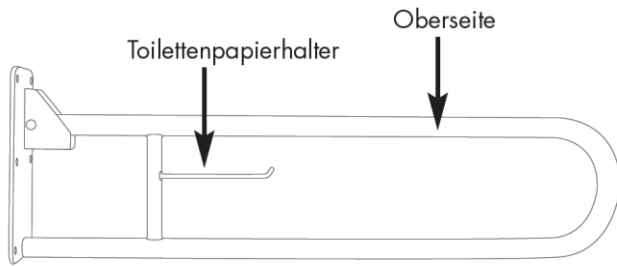

1 Bei Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 Stützklappgriff
- 6 Schrauben
- 6 Dübel
- Handbuch

Prüfen Sie die Sendung sorgfältig auf Transportschäden. Sollten Sie nach der Auslieferung Schäden feststellen, wenden Sie sich an den Frachtführer.

2 Montage des Haltegriffs


VORSICHT Verletzungsgefahr

- Prüfen Sie, dass die Handgriffe sicher und fest an der Wand verschraubt sind. Überprüfen Sie die Fixierung regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel oder Rohre an den Bohrstellen vorhanden sind.
- Die mit dem Produkt gelieferten Stopfen sind für Betonwände oder Vollziegelwände geeignet. Bei anderen Wandtypen erkundigen Sie sich bitte nach der richtigen Art der Montageausrüstung.

Der Stützklappgriff Iris unterstützt Sie beim Hinsetzen auf und Aufstehen. Ein Papierhalter ist integriert. Sie sind überall anwendbar auch in feuchten Räumen. Nutzen Sie nur das Montagematerial, das im Lieferumfang enthalten ist.

Installation Iris:

1. Setzen Sie den Handgriff an die gewünschte Position.
2. Markieren Sie die Bohrposition für die Verschraubungen.
3. Bohren Sie die benötigten Löcher in die Wand.
4. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.

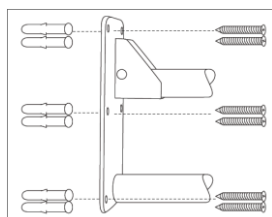

5. Setzen Sie den Handgriff auf die gewünschte Position auf.
6. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie fest an.

Sollten Sie unsicher bei der Montage sein, ziehen Sie einen Fachmann zur Montage hinzu.

3 Verwenden des Haltegriffs

VORSICHT Verletzungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass Sie den Handgriff keinen extremen Temperaturen aussetzen (Sonnenschein, extreme Kälte, Sauna etc.).
- Bei Schäden ist der Badezimmergriff Iris nicht zu nutzen.
- Hängen Sie keine schweren Gegenstände an den Stützklappgriff, da dies Schäden verursacht.

Das maximale Zuggewicht für den Haltegriff beträgt 130 kg.

4 Wartung

Zur Reinigung des Badezimmergriffs Iris sind nur handelsübliche Haushaltsreiniger zu nutzen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, da sonst Verfärbungen auftreten können.

Durch die hochwertige Lackierung wird ein optimaler Korrosionsschutz gewährleistet. Falls die Lackierung durch Kratzer oder ähnliches beschädigt wird, sollten Sie einen Fachhändler aufsuchen, um die betroffene Oberfläche instand setzen zu lassen.

4.1 Erwartete Lebensdauer

Der Haltegriff ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 Jahren ausgelegt.


5 Technische Daten

Hersteller	Vermeiren
Typ	Badezimmergriff
Modell	Iris

Beschreibung	Abmessungen
Maximale Last	130 kg
Länge	740 mm
Höhe	175
Minimale Montagefläche (Montageplatte)	230 x 100 mm
Temperaturbereich für Lagerung	+5°C - +41°C

Technische Änderungen behalten wir uns vor.
 Messtoleranz von ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5 °

Maniglia di sicurezza Iris

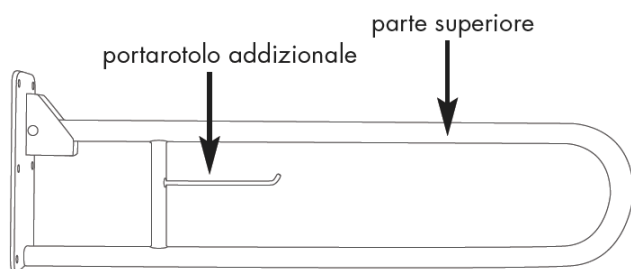

1 Alla consegna

Disimballare il prodotto e verificare che sia completo. Devono essere presenti le parti seguenti:

- 1 maniglia,
- 6 viti di fissaggio
- 6 fischer per il muro
- Manuale

Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto. Se si rilevano danni dopo la consegna, mettersi in contatto con il proprio fornitore.

2 Montaggio della maniglia di sicurezza


ATTENZIONE


Rischio di lesioni

- Assicurarsi che le maniglie siano fissate saldamente ed in totale sicurezza. Controllate il fissaggio.
- Assicurarsi che non ci siano cavi elettrici o altri tubi nella zona in cui montare le maniglie.
- I tasselli forniti con il prodotto sono adatti per pareti in calcestruzzo o muri in mattoni pieni. Per altri tipi di pareti, informarsi sul tipo corretto di attrezzatura di montaggio.

La maniglia di sicurezza pieghevole Iris è un elemento di supporto. E' previsto un portarotolo addizionale. Possono essere utilizzate ovunque, incluso in condizioni di umidità. Utilizzate per l'installazione il materiale incluso nella confezione.

Per posizionare Iris:

1. Collocare la maniglia nella giusta posizione.
2. Segnare la posizione corretta dei fori della maniglia sul muro.
3. Praticare fori nel muro.
4. Montare le spine nei fori.
5. Posizionare la maniglia contro il muro.
6. Posizionare le viti e fissarle saldamente.

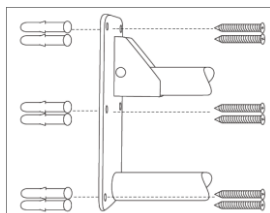

Se avete dei dubbi contattate un professionista.

3 Utilizzo della maniglia per il bagno


ATTENZIONE

Rischio di lesioni, ustioni

- Prestare attenzione durante l'uso in ambienti caldi o freddi (esposizione al sole, freddo estremo, sauna, ecc.).
- Se notate qualsiasi difetto non utilizzate la maniglia.
- Evitate di appoggiare oggetti pesanti alla maniglia di sicurezza, potrebbero causare danni.

Il massimo peso di trazione per la maniglia è 130 kg.

4 Manutenzione

La maniglia Iris può essere pulita e disinfettata con un prodotto di pulizia normale per la casa. Evitate l'utilizzo di prodotti di pulizia aggressivi che possono causare scolorimento delle maniglie.

La qualità elevata del trattamento superficiale garantisce una protezione ottimale contro la corrosione. Se il rivestimento esterno è danneggiato da rigature o in altri modi, far riparare la superficie dal rivenditore.

4.1 Durata di vita prevista

La maniglia è progettata per una durata media di 5 anni.


5 Specifiche tecniche

Marca	Vermeiren
Tipo	Maniglia per il bagno
Modello	Iris

Descrizione	Dimensioni
Carico massimo	130 kg
Lunghezza	740 mm
Altezza	175 mm
Area minima di montaggio (placca di montaggio)	230 x 100 mm
Temperatura di magazzino	+5°C - +41°C

Vermeiren si riserva il diritto di introdurre modifiche tecniche. Tolleranze di misurazione +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.

Barra plegable Iris

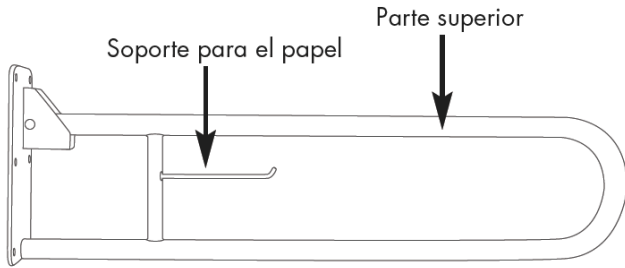

1 Entrega

Desembalar el producto y verificar que la entrega está completa. Las siguientes piezas vienen incluidas en la entrega:

- 1 barra plegable
- 6 tornillos
- 6 tacos de pared
- un manual

Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. Si detectase algún defecto en el producto, contacte con el transportista.

2 Montaje de la barra de baño



PRECAUCIÓN


Riesgo de lesiones

- Compruebe que las barras para el baño estén bien montadas en la pared. Compruebe la fijación de forma regular.
- Asegúrese de que no haya cables eléctricos o tubos en el área de montaje de la barra para el baño.
- El material suministrado con la barra es adecuado para muros de hormigón o paredes de ladrillo. Para otros tipos de paredes, consulte sobre el tipo correcto de equipo de montaje

Estas barras han sido diseñadas como elemento de apoyo general. Además, se dispone de un soporte para el papel higiénico. Pueden utilizarse en cualquier parte, incluso en ambientes húmedos. Utilice los materiales de instalación que acompañan a la barra.

Para instalar la barra Iris:

1. Coloque la barra a la posición deseada.
2. Marque los agujeros de fijación en la pared.
3. Perfore los agujeros necesarios en la pared.
4. Monte los tacos de pared.

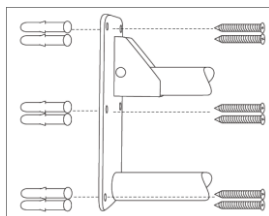

5. Coloque la barra para el baño en la posición deseada contra la pared.
6. Coloque los tornillos y apriete firmemente.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un técnico profesional para que la instale por usted.

3 Uso de la barra de baño



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones, quemaduras

- Tenga cuidado cuando circule por entornos calientes o fríos (luz solar, frío extremo, saunas, etc.).
- Compruébelo con regularidad y, si encuentra algún defecto, no utilice la barra.
- No cuelgue objetos pesados en la barra, ya que podrían causar daños.

El peso máximo de apoyo que soporta la barra del baño es de 130 kg

4 Mantenimiento

La barra Iris puede limpiarse y desinfectarse con productos domésticos normales. No utilice sustancias agresivas que puedan dañar los colores.

La alta calidad de los acabados de las superficies garantiza una protección óptima contra la corrosión. Si el revestimiento exterior presenta arañazos u otros daños, pida a su distribuidor especializado que repare la superficie afectada.

4.1 Vida útil prevista

La barra del baño está diseñada para un promedio de vida útil de 5 años.


5 Datos técnicos

Marca	Vermeiren
Tipo	Barra para el baño
Modelo	Iris

Descripción	Dimensiones
Peso máximo	130 kg
Longitud	740 mm
Altura	175 mm
Área mínima de montaje (Placa de soporte)	230 x 100 mm
Temperatura de almacenamiento	+5°C - +41°C

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos. Tolerancia dimensional ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.

Składana barierka Iris

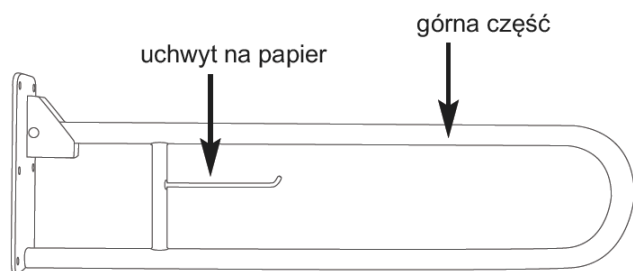

1 Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. W zestawie powinny znajdować się:

- 1 uchwyt łazienkowy
- 6 wkrętów montażowych
- 6 kołków montażowych
- Instrukcja obsługi

Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie skontaktować się z firmą transportową.

2 Mocowanie uchwyty łazienkowego


PRZESTROGA Ryzyko obrażeń

- Sprawdź czy uchwyt łazienkowy jest zamontowany poprawnie do ściany. Regularnie sprawdzaj mocowanie.
- Upewnij się, że w miejscu montażu nie ma żadnych przewodów elektrycznych ani rur.
- Kołki dostarczone wraz z produktem nadają się do ścian betonowych lub wykonanych z pełnej cegły. Dla innych typów ściany użyj odpowiedniego typu materiałów.

Barierka Iris została zaprojektowana jako element poparcia. Dodatkowo posiada uchwyt na rolkę papieru. Mogą być stosowane wszędzie, również w otoczeniu wilgotnym. Należy korzystać z materiałów instalacyjnych, które są dostarczane w komplecie z uchwytem Iris.

Aby zainstalować Iris:

1. Umieść uchwyt łazienkowej w pożądanej pozycji.
2. Zaznacz na ścianie punkty mocowania.
3. Wywierć otwory w ścianie.
4. Zamontuj kołki.
5. Przyłóż uchwyt łazienkowy do ściany.
6. Umieść śruby i mocno dokręć.

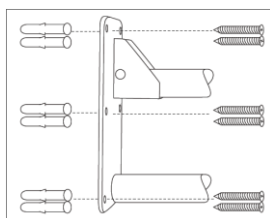

Należy korzystać z materiałów instalacyjnych, które są dostarczane w komplecie z uchwytem Iris.

3 Korzystanie z uchwyty łazienkowego

PRZESTROGA Ryzyko obrażeń, poparzenia

- Należy zachować ostrożność podczas dotykaniu w bardzo wysokich i niskich temperaturach (na ostrym słońcu, mrozie, w saunie itp.)
- W przypadku wystąpienia wad, należy powstrzymać się przed używaniem uchwyty.
- Należy unikać wieszania ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie barierki.

Maksymalne obciążanie dla uchwyty łazienkowego wynosi 130 kg.

4 Konserwacja

Uchwyty Iris można czyścić i dezynfekować za pomocą zwykłych domowych środków czyszczących. Należy unikać stosowania żrących substancji, które mogą powodować przebarwienia.

Wysoka jakość warstwy wierzchniej zapewnia optymalną ochronę przed korozją. W przypadku uszkodzenia warstwy wierzchniej poprzez zadrapanie lub w inny sposób należy zlecić wyspecjalizowanemu sprzedawcy naprawę powierzchni.

4.1 Przewidziany czas życia


Uchwyt łazienkowy został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu go przez średnio 5 lat.

5 Informacje techniczne

Producent	Vermeiren
Typ	Uchwyty łazienkowe
Model	Iris

Opis	Wymiary
Maksymalne obciążenie	130 kg
Długość	740 mm
wysokość	175 mm
Minimalna powierzchnia montażu (płyta montażowa)	230 x 100 mm
Temperatura przechowywania	+5°C - +41°C
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Tolerancja pomiarów +/- 15mm / 1,5kg / 1,5°.	

Sklopné madlo Iris

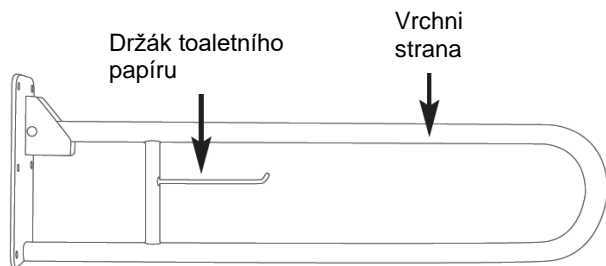

1 Při dodávce

Vybalte Váš produkt a ověřte, zda je dodávka kompletní. Balení obsahuje následující položky:

- 1 koupelnové madlo
- 6 šroubů
- 6 hmoždinek
- Návod k obsluze

Ověřte, že výrobek není poškozen přepravou. Zjistíte-li při dodávce jakékoli škody, obraťte se na dopravce.

2 Montáž koupelnového madla


POZOR


Nebezpečí zranění

- Ujistěte se, že je koupelnové madlo bezpečně připevněno ke zdi. Pravidelně kontrolujte připevnění.
- Ujistěte se, že montážní plochou koupelnového madla nevedou žádné elektrické kabely nebo jiné trubky.
- Hmoždinek dodávané s výrobkem jsou vhodné pro betonové nebo cihlové zdi. U ostatních typů stěn se obraťte na vašeho odborného prodejce na správný typ montážního materiálu.

Sklopné madlo Iris je navrženo jako podpurné zařízení. Dále slouží jako držák toaletního papíru. Je použitelné všude, včetně vlhkého prostředí. Použijte instalační materiály dodávané spolu s Iris.

Instalace Iris:

1. Umístěte koupelnové madlo do požadované polohy.
2. Označte upevňovací otvory na zdi.
3. Vyvrtejte otvory ve zdi.
4. Vložte hmoždinky.
5. Umístěte koupelnové madlo proti zdi.
6. Našroubujte šrouby a pevně je utáhněte.

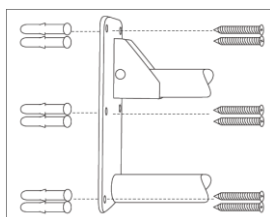

Máte-li jakékoli pochybnosti, neváhejte pro instalaci Iris kontaktovat profesionála.

3 Použití koupelnového madla


POZOR

Nebezpečí zranění, popálení

- Dbejte zvýšené opatrnosti při použití v extrémně teplém nebo chladném prostředí (sluneční svit, extrémní chlad, sauny atd.).
- Pokud si všimnete jakýchkoli závad, nepoužívejte Iris.
- Vyvarujte se zavěšení těžkých předmětů na madlo, protože by to mohlo způsobit poškození.

Maximální zatížení koupelnového madla je 130 kg.

4 Údržba

Iris lze čistit a dezinfikovat běžnými výrobky pro domácnost. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které mohou způsobit změnu barvy.

Vysoká kvalita povrchové vrstvy zaručuje optimální ochranu proti korozi. Pokud je vnější povrch poškozen poškrábáním nebo jiným způsobem, požádejte svého odborného prodejce o opravu zasaženého povrchu.

4.1 Životnost výrobku

Koupelnové madlo je navrženo tak, aby mělo průměrnou životnost 5 let.

5 Technické parametry

Výrobce	Vermeiren
Typ	Koupelnové madlo
Model	Iris

Popis	Rozměry
Maximální zatížení	130 kg
Délka	740 mm
Výška	175 mm
Minimální montážní plocha (montážní deska)	230 x 100 mm
Skladovací teplota	+5°C - +41°C
Vyhrajujeme si právo na zavádění technických změn. Tolerance měření +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	



Vermeiren GROUP NV
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com